

AGA-OP-POWER-MAT

Tables d'opération

Les tables d'opération AGA-OP-POWER-MAT se distinguent non seulement par leur fonctionnalité mais aussi grâce à leur colonne de levage au design élégant. Le réglage hydraulique de la hauteur se fait par une pompe à pied placée au centre.

Caractéristiques

- La colonne de levage est en alliage léger anodisé.
- Tous les segments sont réglables individuellement, à la main. Avec ce type de construction, qui est indépendante d'une source d'énergie, la table d'opération AGA-OP-POWER-MAT vous est proposée à un prix très intéressant.
- Les coussins rembourrés amovibles faits de mousse de polyuréthane souple (épaisseur 65 mm) sont recouvert d'un similicuir conducteur d'électricité, de couleur noire (mélange coton/polyester et revêtement 100% PVC).
- Le repose-tête est réglable en continu et sécurisé par un mécanisme de serrage de tige.
- Le réglage en continu du dossier, du siège et du plateau jambes (réglables séparément à 90°) se fait manuellement, par vérin à gaz.
- Les rails normalisés intégrés au châssis au niveau du dossier, du siège et du plateau jambes permettent le montage de divers accessoires tels qu'arceau d'anesthésie, table à instruments, supports latéraux, etc.



1 MP-1050/5Y, LR/Z-50

Réglages

- Repose-tête +20°/-30°
- Dossier +45°/-20°
- Trendelenburg 20°
- Anti-Trendelenburg 8°
- Siège +40°/-10°
- Jambes 0°/-90°
- Hauteur 785-1085 mm

Accessoires

- Porte-rouleau de papier (PU-2049), roulettes Ø50mm avec verrouillage centralisé (LR/Z-50). Montage ultérieur impossible.
- Liste complète sur internet et dans le catalogue p.14-19.

Pour plus d'information sur ces produits, voir www.agasan.com et le catalogue AGA à la page 8.






3 Prise équipotentielle

4 MP-1050/5Y, LR/Z-50



2 MP-1050/5Y, NB-30560, BKO-2522, LR/Z-50

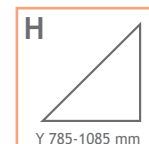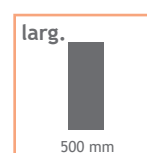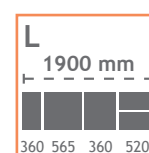

Charge max.
150 kg
Poids prod.
110 kg

Photo	Référence	Largeur (mm)	Cadre		Prix (EUR)
			Acier inox.	Couleur	
dans 1 - 4	MP-1050/5Y	500		x	
id. 1 - 4	MP-3050/5Y	500	x		

AGA-OP-POWER-MAT Options d'équipement



5 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, LR/Z-50, PU-2049

Options

- Châssis tubulaire en acier et couvercle de base recouverts de plastique (Réf. MP-1050/5Y) .
- Châssis en acier inoxydable (perles de verre soufflé) et couvercle de la base en acier inoxydable (Réf. MP-3050/5Y).
- Compartiment pour cassette à rayons X sous l'assise (Réf. MP-RF), env. 435 x 305 mm. Un montage ultérieur est impossible
- Bac en acier inoxydable (Réf. VA-30/MP), environ 250 x 190 x 45 mm (montage ultérieur impossible).
- Coussins plats, d'épaisseur 40 mm (Réf. MP-PAL), sur plaques radiotransparentes d'épaisseur 15 mm. La surface des coussins est sans couture. Les coussins sont maintenus en place par une fermeture à boucles et crochets (de type Velcro), Les bandes à boucle sur le côté inférieur des coussins se fixent aux bandes à crochets placées sur les plaques de support.
- Plateaux de jambes séparés, amovibles et écartables (Réf. MP-BTSA) au lieu de la version standard qui permet seulement de les baisser à 90° (Réglage vertical: 0°/90°, réglage lateral/écartement: 0°/90°, manuel avec vérin à gaz).
- Réglage du repose-tête en continu avec vérin à gaz (Réf. KVG) au lieu du réglage standard par mécanisme de serrage de tige.

Configurations disponibles :

Les tables d'opération AGA-OP-POWER-MAT sont conçues pour différents domaines d'applications et pour cela, peuvent être équipées de différents composants. Voici une description des options d'équipement disponibles. Grâce aux réglages mécaniques, AGA-OP-POWER-MAT reste indépendant d'une source d'alimentation électrique.

- Le modèle MP-1050/5YGYN comprend la table d'opération avec une découpe dans la partie du bassin, MP-BTSA et MP-PAL.
- Le modèle MP-3050/5YGYN est livré avec les mêmes composants que le modèle MP-1050/5YGYN décrit précédemment, mais avec châssis et couvercle de la base en acier inoxydable.



6 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, LR/Z-50, PU-2049



7 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, BHG-600, BKG-600, RL-2060, LR/Z-50, PU-2049

Accessoires

- Supports de jambes Göpel (BHG-600) et pinces de fixation Göpel (BKG-600), accoudoirs circulaires (RL-2060), bac en acier inoxydable (VA-30/MP), porte-rouleau de papier (PU-2049)
- Roulettes avec verrouillage centralisé (LR/Z-50).

Voir la liste complète sur www.agasan.com et dans le catalogue AGA aux pages 14-19

Photo	Référence	Larg. (mm)	Cadre		Prix (EUR)
			Acier inox.	Couleur	
dans 5 - 7	MP-1050/5YGYN	500		x	
id. 5 - 7	MP-3050/5YGYN	500	x		